



音波振動歯ブラシ ブイセブン

歯周病予防ブラッシング「つまようじ法」を音波振動で効果的に！

- 短時間で効果的な歯ぐきのマッサージを
音波振動歯ブラシでつまようじ法を行うと、手用歯ブラシよりも短時間でのマッサージ効果が期待できます。
(手用の)V7歯ブラシでつまようじ法を行うように歯ブラシ本体を動かしながらブラッシングしてください。

こんな方におすすめ！

- 歯間部の歯肉マッサージを手軽に、効果的に行いたい方に
- (手用の)V7歯ブラシでつまようじ法のセルフケアを行うのが苦手な方に
- 歯間だけでなく、歯面もよりキレイに磨きたい方に



22,000ストローク/分の音波振動

35gの軽量モデル(単4電池セット時)




- 毛のかたさ／ふつう
- 乾電池式／単4形アルカリ乾電池1本使用 (試供品1本付属)
- 替ブラシ1本付属
- メーカー希望患者様価格(税別)
本体セットET-V1／2,400円
別売替ブラシ RT-01
替ブラシ2本セット／700円

歯間がスッキリ磨ける「つまようじ法」の磨き方



①.毛先を下に向けて、歯と歯ぐきの境目にあてます。(下の歯を磨くときは毛先を上)

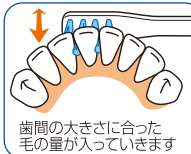

②.そのまま、毛先で突っくようにして、歯と歯の間に歯ブラシの毛先を入れます。
③.①～②の要領で毛先を歯間に「入れて、出して」と1カ所を7～8回くりかえします。

<http://www.pmjv7.co.jp>
つまようじ法の磨き方を動画で見られます

つまようじ法

