

つまようじ法のセルフケアを、 ラクに、短時間で

つまようじ法ブラッシング専用設計。

スリム&コンパクト

従来のモデルよりさらにコンパクトで扱いやすくなりました。
全長は17.5cmで、手用のV7歯ブラシに近いサイズです。

軽さの追求

わずか34g*と軽量で、セルフケアの負担になりません。
*単4電池セット時

歯間までスッキリ

独自の2列V型毛により、歯間に入りやすく、歯間の歯垢除去、歯肉マッサージが短時間で効果的に行えます。



使い方を動画でチェック



NEW
音波振動
歯ブラシ V7
ET-V2

pmj

PREVENTIVE MEDICINE IN JAPAN

音波振動で歯間も歯面もよりキレイに 短時間で効果的なブラッシングを



エコへのこだわり

ブラシヘッド部分はわずか約3g(長持ちキャップ込)。音波振動歯ブラシV7を使用することが、エコにもつながります。

1年間の歯ブラシ使用量(重量)が半分に!

手用のV7歯ブラシを
毎月1本使用する場合

12本で
約113g

音波振動歯ブラシV7
(ET-V2)1ヵ月に
1回ヘッド交換する場合

12本+本体で
約58g

約1/2に削減!

※ET-V2本体は、1年以上使用することも可能ですが、1年後に本体も交換したとして試算(電池重量は含まず)。

耐久性の向上

本体とブラシヘッドの接合部にはステンレスシャフトを採用し、本体部分の耐久性を高めました。



原寸大



本体



替ブラシ(2本入)

■製品仕様

ブラリストローク回数: 約22,000回/分
使用電池: 単4アルカリ乾電池1本(試供品1本付属)
電池寿命: 約60日(1日2回使用、毎回3分の場合)

●歯ブラシ

柄の材質	毛の材質	毛のかたさ	耐熱温度	キャップの材質
ポリプロピレン	ナイロン	ふつう	60度	ポリプロピレン

●本体: 中国製 ●ブラシヘッド: 日本製

●メーカー希望患者様価格(税別)

- ・本体セットET-V2(替ブラシ1本付属): 2,700円
- ・別売替ブラシRT-02(2本入): 700円


効果的な使用方法

手用のV7歯ブラシでつまようじ法を行うように歯ブラシ本体を動かしながらブラッシングしてください。1カ所につき約5秒間おこなうのが効果的です。約3分間で口全体を磨くようにご使用いただくことをお勧めします。

歯間が
スッキリ磨ける
「つまようじ法」
の磨き方



①.毛先を下に向けて、歯と歯ぐきの境目にあてます。(下の歯を磨くときは毛先を上)

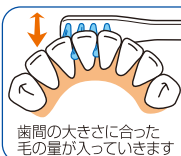

②.そのまま、毛先で突っくようにして、歯と歯の間に歯ブラシの毛先を入れます。
③.①~②の要領で毛先を歯間に入れて、出してとくりかえします。

<https://www.pmjv7.co.jp>
つまようじ法の磨き方を動画で見られます

