

Phương pháp đánh răng để phòng và điều trị bệnh nha chu

Hiệu quả của phương pháp "Bàn chải tằm"

※ Minh họa phương pháp đánh răng bằng Bàn chải tằm

Trường hợp 1

Lần kiểm tra đầu tiên (Nữ, 48 tuổi)



Áp dụng phương pháp đánh răng bàn chải tằm ...



Tình trạng cải thiện sau 1 tháng



Trường hợp 2

Lần kiểm tra đầu tiên (Nam, 27 tuổi)



Áp dụng phương pháp đánh răng bàn chải tằm ...



Tình trạng được cải thiện sau 6 tháng



Hình ảnh của Trường Đại học Y khoa và Nha khoa Okayama - Khoa Nha Khoa Dự phòng

Triệu chứng

- Nướu chảy mủ
- Nướu bị chảy máu
- Hôi miệng
- Nướu bị sưng
- Khó cắn đồ ăn cứng



Tình trạng sau khi điều trị

- Nướu chắc khỏe
- Không chảy máu & không bắn nướu
- Nướu khỏe mạnh và có màu hồng nhạt pale pink
- Không hôi miệng
- Răng ít lung lay hơn



Bệnh nha chu là căn bệnh mà bạn có thể tự mình phòng ngừa!

Phương pháp đánh răng bàn chải tằm



Một cảm giác sáng khoái với đánh răng kẽ răng

Nướu răng khỏe hơn với sự xoa dịu

Để ngăn ngừa bệnh nha chu, điều quan trọng là phải duy trì nướu khỏe mạnh có thể chống lại vi khuẩn bệnh nha chu. Lý do cho điều này là, bệnh nha chu (viêm nướu hoặc viêm nha chu) tiến triển khi sức đề kháng của nướu giảm.

Do kích ứng cơ học (hiệu ứng xoa bóp) gây ra bởi "phương pháp đánh răng bằng tằm", các tế bào nướu tăng lên và viêm có thể được chữa khỏi. Sự tăng sinh tế bào này chỉ được nhìn thấy ở những khu vực chạm vào đầu bàn chải đánh răng. Do đó, bạn cần đánh răng bằng đầu bàn chải đánh răng giữa hai hàm răng.



Đại học Okayama
Giáo sư danh dự
Tatsuo Watanabe


Một ý tưởng sinh ra từ nghiên cứu phòng ngừa về bệnh nha chu

Cách đánh răng bằng "Phương pháp Bàn chải tăm"

Một cảm giác sảng khoái với đánh răng kẽ răng!
Massage làm cho nướu khỏe hơn!

Từ mặt ngoài

Răng cửa trên

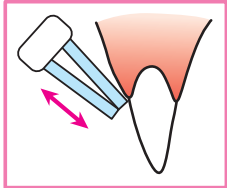

Đối với răng trên, khi đánh hướng bàn chải xuống dưới, đặt đầu lông chải giữa răng và nướu. (Khi đánh răng dưới, xoay bàn chải lên trên)



Giữ nguyên hướng, di chuyển bàn chải trượt về phía chóp răng.



Khi đầu bàn chải chạm vào giữa răng, đưa nó trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại động tác này khoảng 10 lần cho mỗi nơi.

Back teeth



Góc mà đầu bàn chải chạm vào giữa răng là khoảng 90 độ. (Hơi hướng xuống dưới cho răng hàm trên và hơi hướng lên trên cho răng dưới)

Từ mặt trong ra

- Đối với mặt sau, sử dụng đầu bàn chải đánh răng để chọc vào giữa răng và lặp lại khoảng 10 lần cho mỗi nơi.
- Một số lông bàn chải phù hợp với kích thước của không gian kẽ răng sẽ vào và làm sạch không gian.



Đối với vị trí răng cửa, bàn chải đánh răng theo đường chéo

Răng cửa dưới



Hình nhìn từ bên trong ra

Mặt trong



- Sử dụng các phương pháp đánh răng khác ngoài phương pháp tăm tùy theo khu vực, chẳng hạn như bề mặt răng hoặc khu vực cần. Bạn có thể chải tất cả các răng bằng bàn chải đánh răng V7.
- Cũng thích hợp cho những người đeo niềng răng hoặc đánh răng cấy ghép.

Khi sử dụng phương pháp đánh răng bằng bàn chải tăm:

- Có thể có chảy máu đáng kể từ nướu, nhưng chảy máu thường ngừng sau một đến hai tuần. (Điều này là do nướu trở nên mạnh hơn do hiệu ứng mát xa của việc đánh răng.)
- Nướu bị sưng do bệnh nha chu lâu khiến nướu có thể bị thoái hóa.
- Nên chải kỹ mỗi ngày một lần trong khoảng 7 đến 8 phút.
- Nếu sau khi tiếp tục phương pháp tăm mà bạn cảm thấy các triệu chứng trở nên xấu hơn, vui lòng tham khảo ý kiến nha sĩ.


Đề xuất cho những người

- Quan tâm đến các bệnh nha chu (viêm nướu & viêm nha chu).
- Quan tâm đến vấn đề về hôi miệng.
- Đã thử bàn chải kẽ răng và chỉ nha khoa nhưng không lâu dài được.
- Khó đánh mặt trong của răng và các vị trí khác với bàn chải thông thường



Phương pháp đánh răng Bàn chải tăm V7

Răng là theo bạn cả cuộc đời

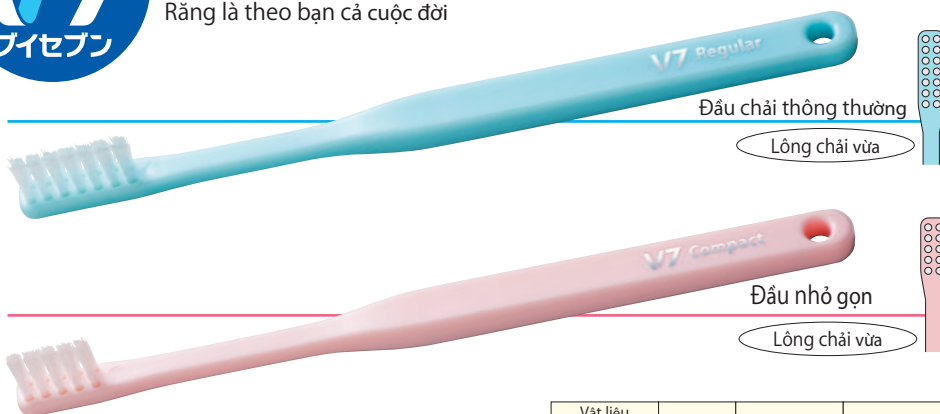

Đầu chải thông thường

Lông chải vừa

Đầu nhỏ gọn

Lông chải vừa


Vật liệu tay cầm	Đầu lông	Vỏ đựng	Chịu nhiệt
Polypropylene	Nylon	Polypropylene	80°C



Lông chải 2 hàng chữ V có thể dễ dàng chạm tới giữa các răng

Được thiết kế để lông có thể dễ dàng tiếp cận giữa các răng. Bằng cách sử dụng phương pháp tăm, bạn có thể loại bỏ mảng bám răng và xoa bóp nướu một cách hiệu quả.

Vỏ đựng cho đầu lông chải dài

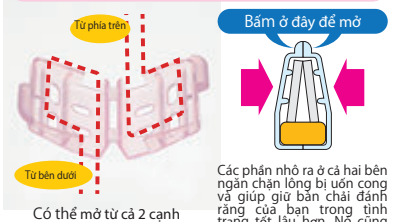

Có thể mở từ cả 2 cạnh

Các phần nhô ra ở cả hai bên ngăn chặn lông bị uốn cong và giúp giữ bàn chải đánh răng của bạn trong tình trạng tốt lâu hơn. Nó cũng dễ dàng mang theo.



Phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Kengo Việt Nam

Đ/C: B15, KN Ở Thấp tầng, Số 9A Ngõ 233 Đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Showroom: D128 Phố Trúc, KĐT Ecopark, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên.

Hotline: 0934 61 99 69 * 0938 80 22 83 * Tel/Fax: +84 24 6668 0240

W: oh-kinaki.vn * W: kengo.com.vn * E: support@kengo.com.vn

